



## i-flo™ high flow iltbrille



**Intensiv** ▪ i-flo high flow iltbrille



## i-flo™ high flow iltbrille


i-flo til engangsbrug, er Intersurgicals løsning på, og designet til levering af High Flow Oxygen Terapi (HFOT). i-flo er tilgængelig i tre størrelser, anvendes til voksne patienter i et hospitalsmiljø.

HFOT er blevet en vigtig behandling for respiratorisk støtte hos patienter med hypoxæmisk respirationssvigt og anses for at tilbyde en række fordele i forhold til mere konventionelle iltterapi behandlinger. Disse fordele har vist sig at omfatte:

- Forbedret iltning
- Nedsat vejtræknings arbejde
- Forbedret sekret mobilisering
- Forbedret patient tolerance
- Undgåelse af intubation<sup>[1]</sup>

I-flo supplerer Intersurgicals omfattende udvalg indenfor intensiv pleje af respirationssystemer og tilbehør, og det diskrete design er udviklet med fokus på ydeevne og patientkomfort.


I-flo indeholder en række unikke funktioner og fordele, der hjælper med at sikre den optimale levering af iltbehandling med højt flow.

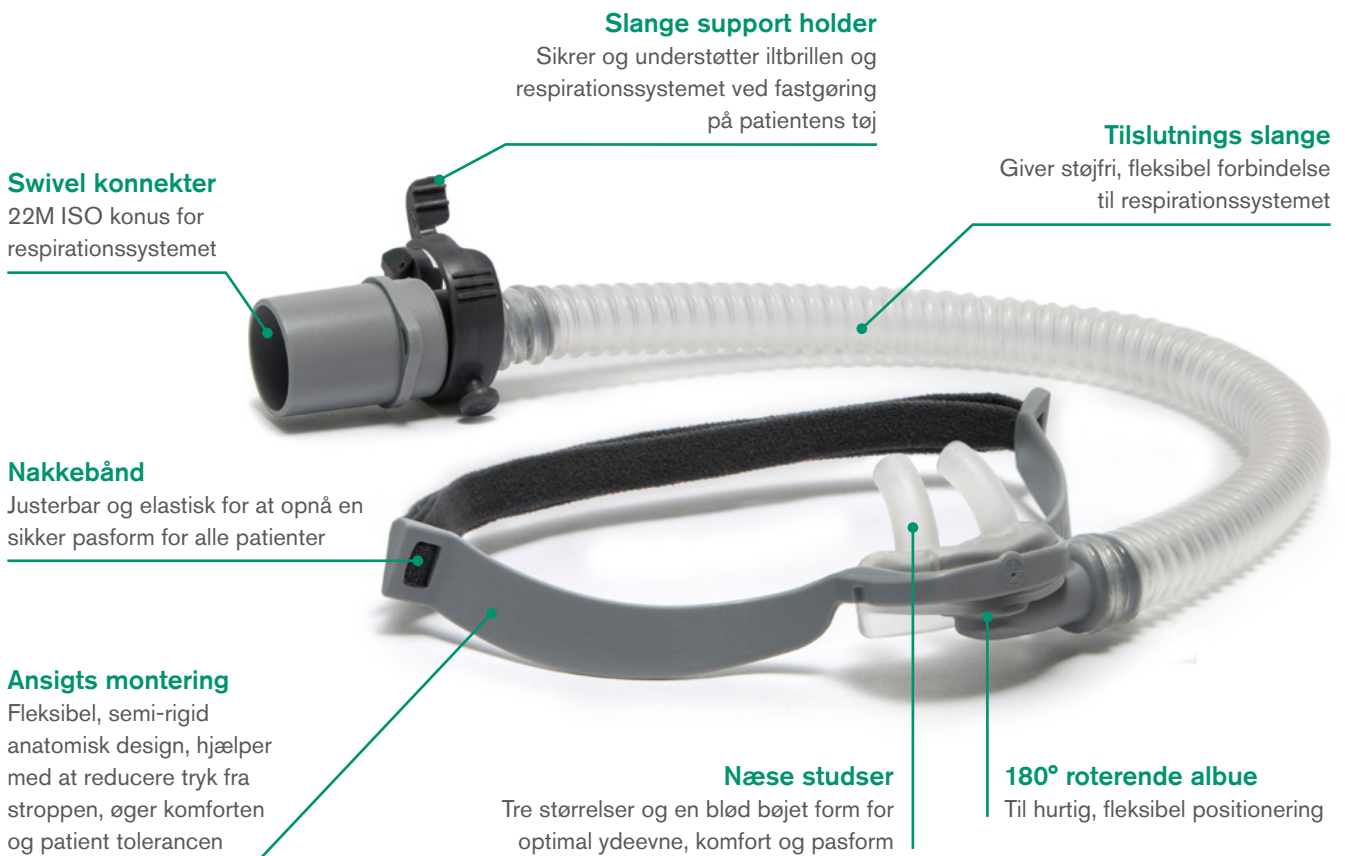

[1] Masaji Nishimura. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Resp.Care 2016 Apr;61(4):529-41



## Adaptiv og sikker

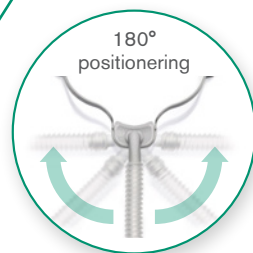

I-flo's unikke 180° swivel albue muliggør nem og bekvem placering af udstyret ved sengen.



I-flo's support holder og nøglesnor sikrer understøttelse af respirationssystemets slanger og giver patienten mulighed for at bevæge sig frit med iltbrillen, uden bekymring om dislokation eller ubehag.

## Behagelig og støttende



Et anatomisk ansigts-monteret design, fører nakkebåndet over patientens ører, og hjælper med at minimere friktion og ubehag.

Den fleksible, semi-rigide ansigtsmontering sikrer også, at trykket fordeles jævnt over patientens kinder. Dette øger iltbrillens stabilitet og støtte, og hjælper med at forhindre udvikling af trykskader.







## i-flo™ high flow iltbrille

Kode	Beskrivelse	Antal pr. karton
7300000	i-flo lille voksen, high flow iltbrille	7
7301000	i-flo medium voksen, high flow iltbrille	7
7302000	i-flo stor voksen, high flow iltbrille	7





Send en forespørgsel

Se videoen



## Respirationssystem med enkelt slange

Kode	Beskrivelse	Antal pr. karton
2060310	22mm Flexslange med varmetråd, fugtekammer og ekstra limb, ≥ 1,6m	7
2060000	22mm Flexslange med varmetråd og fugtekammer, ≥ 1,6m	7

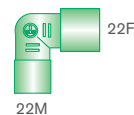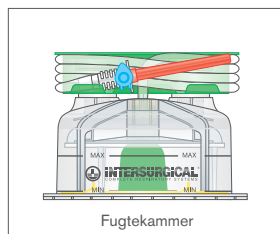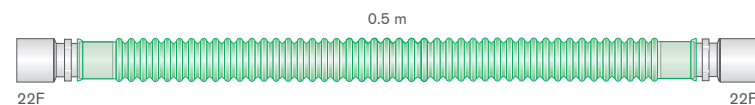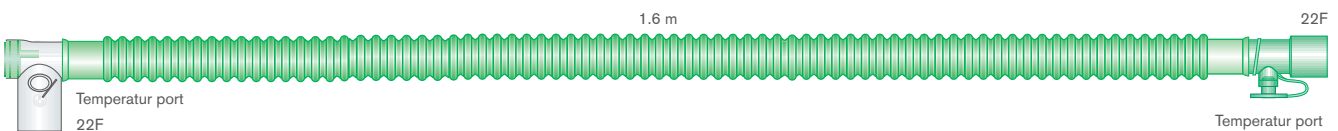

IS1.53 DK • Issue 4 01.25



Intersurgical Danmark, Rådhusstorvet 7, 1, 3520 Farum, Danmark  
T: +45 28 69 80 00 info@intersurgical.dk www.intersurgical.dk



Fabrikanten Intersurgical Ltd er certificeret til  
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2016 og MDSAP

**Venligst overvej før du printer**

Sparer energi og papir.  
Hvis du ønsker at printe dette produktblad,  
venligst print på dobbeltside.