



Intersurgical EcoLite™ sortiment

Behageligt for patienten
Godt for miljøet



Grønnere ▪ Lettere ▪ Mere komfortabel

Intersurgical EcoLite™ sortiment af ilt- og forstøvermasker

Velkommen til "Komfort Zonen"

Det unikke design og materialer, der er blevet anvendt til fremstilling af Intersurgical EcoLite maske, giver forbedret patientkomfort og en reduceret miljøpåvirkning.

Behagelig for patienten

Forbedret patientkomfort har været nøglen til udviklingen af EcoLite maske fra Intersurgical. Den seneste produktions teknologi har gjort det muligt for os at kombinere to ikke-PVC materialer i det samme produkt, polypropylenmaterialet, der danner kuplen af Intersurgical EcoLite maske, er klar, let og fast nok til at bevare maskens form, mens det andet blødere TPE materiale der anvendes i forseglingen, er i kontakt med patientens ansigt.

Godt for miljøet

Intersurgical EcoLite maske er en vigtig del af vores Eco-serie, designet som en del af vores løbende fokus på bæredygtig udvikling. Forskellige grupper har sat spørgsmålstegn ved brugen af PVC i medicinske produkter og dets indvirkning på miljøet. Anvendelsen af alternative materialer har resulteret i eliminering af PVC fra Intersurgical EcoLite maskens kuppel og forsegling, hvilket reducerer miljøpåvirkningen.

Intersurgical EcoLite

[Find ud af mere](#)

Eco sortiment

[Find ud af mere](#)



Indadbøjet næseforsegling

Tilpasser sig forskellige næse former. Designet for at forhindre flow gener ind i patientens øjne

Ingen metal næseklemme

MR kompatibel

Udåndings porte

Designet til at minimere genånding af kuldioxid

O₂

Et valg af "under hagen" eller "på hagen" positioner


Giver en bedre pasform til en bredere vifte af patienters ansigtsform

Blød ansigts forsegling

Øget patient komfort

Elastikken kan placeres under eller over ørerne

Ved placering under øret elimineres traume over øret

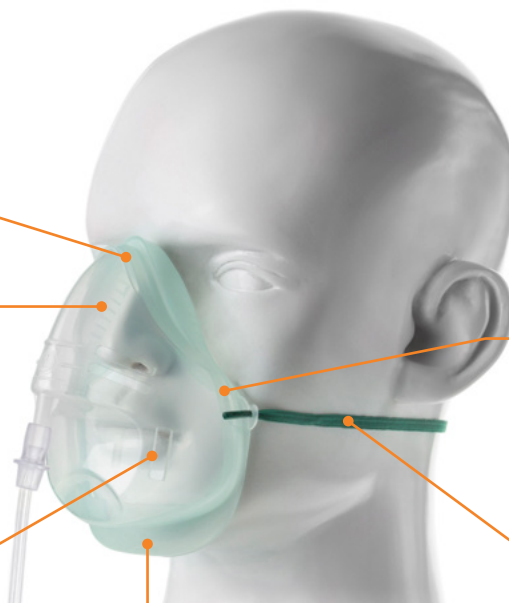

Tilgængelig med iltslange med universal konekter, som kan monteres til en 6 mm flowmeter studs, eller monteres direkte på en 9/16 UNF Diameter index Safety System (D.I.S.S.) flowmeter.







Medium koncentration iltmaske

Intersurgical EcoLite™ iltmaske til voksne med medium koncentration, tilbyder en behagelig letvægts mulighed, som er velegnet til en bred række af ansigtsformer.



Kode	Beskrivelse	Slange længde	Antal pr. karton
1136015	Intersurgical EcoLite, voksen, medium koncentration iltmaske		55 
1135015	Intersurgical EcoLite, voksen, medium koncentration iltmaske med iltslange	2,1m	40 
1135017	Intersurgical EcoLite, voksen, medium koncentration iltmaske med iltslange med universal konnekter	2,1m	30 

[Send en forespørgsel](#)

[Se videoen](#)

FiltaMask™

FiltaMask kombinerer supplerende ilt tilskud med et filter medie, der dækker udåndings portene. FiltaMask er beregnet til anvendelse på patienter, der kan være en kilde til aerosoliserede smitsomme patogener, og som også har brug for supplerende ilt.



Kode	Beskrivelse	Slange længde	Antal pr. karton
1145000	FiltaMask, Eco, voksen, medium koncentration iltmaske med iltslange	2,1m	15 







[Send en forespørgsel](#)

Sentri™ ETCO₂ maske

Sentri-masken er en voksen, medium koncentration Intersurgical EcoLite iltmaske med Luer lock-konnekter, som er beregnet til tilslutning af en monitorslange, der monteres til et kapnometer i den anden ende. Sentri-masken er beregnet til måling af end-tidal CO₂ (ETCO₂) i ekspirations gassen, samtidig med tilførsel af ilt til patienten.

[Send en forespørgsel](#)



Kode	Beskrivelse	Slange længde	Antal pr. karton
1142015	Sentri Intersurgical EcoLite, voksen, maske med CO ₂ monitorslange og iltslange	2,1m	30 
1143015	Sentri Intersurgical EcoLite, voksen, maske med CO ₂ monitorslange, filter og iltslange	2,1m	30 
1143018	Sentri Intersurgical EcoLite voksen, maske med CO ₂ monitorslange, filter og iltslange med universal konnekter	2,1m	30 
1141015	Sentri Intersurgical EcoLite, voksen, maske med iltslange	2,1m	30 
1142016	Sentri Intersurgical EcoLite voksen, maske med CO ₂ monitorslange for Microstream® capnografi og iltslange	2,1m	30 
1143017	Sentri Intersurgical EcoLite voksen, maske med CO ₂ monitorslange for Microstream® capnografi, filter og iltslange	2,1m	30 

 Produkt med lavere miljøpåvirkning

Microstream® er et registreret varemærke tilhørende Oridion Medical 1987 Ltd.

Voksen høj koncentrations iltmaske

- To integrerede hage forseglinger, samt elastik over eller under øret, sikrer at masken passer til en bredere vifte af ansigtsformer
- Disse design funktioner kombineres for at give en forbedret forsegling af patientens ansigt, hvilket igen resulterer i høj iltkoncentration, da mindre omgivende luft kommer ind i masken
- Sikkerhedsventiler med lav modstand åbner for at tillade patienten at indånde luft, hvis ilttilførslen svigter eller er utilstrækkelig til at opfylde peak flow kravet



Indadbøjet næseforsegling

Tilpasser sig forskellige næse former. Designet for at forhindre flow gener ind i patientens øjne

Ingen metal næseklemme

MR kompatibel

To integrerede sikkerheds ventiler

Tillader patienten at trække vejret fra den omgivende luft, hvis ilt forsyningen svigter

Blød ansigts forsegling



Øget patient komfort


Elastikken kan placeres under eller over ørerne

Ved placering under øret elimineres traume over øret

Et valg af "under hagen" eller "på hagen" positioner

Giver en bedre pasform til en bredere vifte af patienters ansigtsform

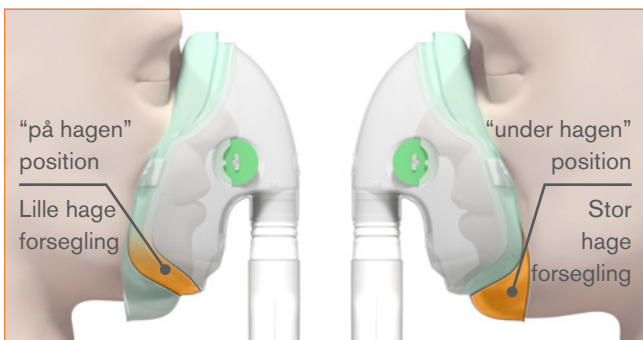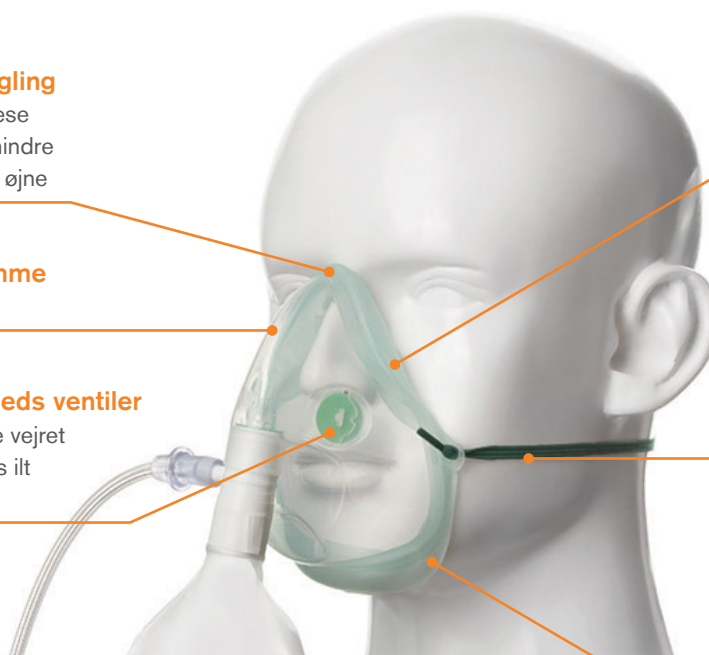

Kode	Beskrivelse	Slange længde	Antal pr. karton
1181015	Intersurgical EcoLite™, voksen, høj koncentrations iltmaske med iltslange	2,1m	24 

[Send en forespørgsel](#)

[Se videoen](#)



Silente™ venturi maskesæt

Silente er designet til at fungere med minimal støjniveau. Den store diameter på kuplen, giver plads til nem kalibrering, med yderlig inkorporeret "pulltwist" bevægelse, dette for at forhindre fejlagtig justering.

Silente venturi ventilen er designet til at levere faste ilt koncentrationer, der kan justeres til at passe til de kliniske krav.



Kode	Beskrivelse	Slange længde	Antal pr. karton
1137015	Silente, Intersurgical EcoLite™, voksen, justerbar venturi maske sæt med iltslange	1,8m	30
1137016	Silente, Intersurgical EcoLite, voksen, justerbar venturi maske sæt med iltslange med universal konekter	1,8m	30

Send en forespørgsel

MultiOx™ venturi maskesæt

MultiOx er en omkostnings effektiv justerbar venturi ventil med samme design egenskaber som Silente-serien.

MultiOx venturiventilen er designet til at levere faste ilt koncentrationer, der kan justeres til at passe til de kliniske krav.



Kode	Beskrivelse	Slange længde	Antal pr. karton
1117015	MultiOx, Intersurgical EcoLite, voksen, justerbar venturi maske sæt med iltslange	1,8m	80

Send en forespørgsel

Venturi ventil Intersurgical EcoLite™ maskesæt

Dette produkt indeholder Intersurgical EcoLite maske, der tilbyder patientkomfort med reduceret miljøpåvirkning.



Kode	Beskrivelse	Slange længde	Antal pr. karton
1107085	Intersurgical EcoLite, voksen, venturi maske sæt, komplet med 6 ventiler og iltslange	1,8m	25

Send en forespørgsel

Intersurgical EcoLite™ venturi maskesæt

Dette sæt indeholder Intersurgical EcoLite maske med en enkelt specifik venturi ventil, som giver et hidtil uset niveau af komfort og reduceret miljømæssig påvirkning.



Kode	Beskrivelse	Farve	Slange længde	Antal pr. karton	
1060085	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 60% venturi ventil, grøn	●		40	
1060081	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 60% venturi ventil, grøn og iltslange	●	1,8m	30	
1040085	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 40% venturi ventil, rød	●		40	
1040081	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 40% venturi ventil, rød og iltslange	●	1,8m	30	
1035085	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 35% venturi ventil, gul	●		40	
1035081	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 35% venturi ventil, gul og iltslange	●	1,8m	30	
1031085	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 31% venturi ventil, orange	●		40	
1031081	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 31% venturi ventil, orange og iltslange	●	1,8m	30	
1028085	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 28% venturi ventil, hvid	○		40	
1028081	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 28% venturi ventil, hvid og iltslange	○	1,8m	30	
1024085	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 24% venturi ventil, blå	●		40	
1024081	Intersurgical EcoLite, voksen, iltmaske med 24% venturi ventil, blå og iltslange	●	1,8m	30	

Send en forespørgsel

Intersurgical EcoLite forstøver ansigtsmaske løs, og med forstøver

Intersurgical EcoLite forstøvermaske fås individuelt eller med Cirrus™2 eller HOT Top™2 forstøvere.



Kode	Beskrivelse	Slange længde	Antal pr. karton	
1188015	Intersurgical EcoLite, voksen, forstøver maske, løs		50	
1453015	Cirrus2 forstøversæt, voksen, med EcoLite maske samt iltslange	2,1m	30	
1463015	HOT Top2 forstøversæt, voksen, med EcoLite maske samt iltslange	1,8m	30	


Send en forespørgsel



Tracheostomi maske, voksen

- Intersurgical EcoLite™ tracheostomi maske er en høj kvalitets letvægts maske, med "quick release" elastik der gør den nemt at bruge.
- Elastiksnoren med "quick release" system, sikrer at voksen tracheostomi maske let kan fjernes og genmonteres, dette forenkler hygiejne procedurerne.



Kode	Beskrivelse	Konnektorer	Antal pr. karton
1200050	Intersurgical EcoLite, voksen, tracheostomi maske 22M	22M	30 

[Send en forespørgsel](#)

[Se videoen](#)

Pædiatri ilt og forstøver maske

Vi tilbyder også en række pædiatriske Intersurgical EcoLite muligheder.

Blød ansigts forsegling

Øget patient komfort

Ekspirations porte

Formen og placeringen af ekspirations portene er designet, til at minimere mængden af kuldioxid genånding

Et valg af "under hagen" eller "på hagen" position

Giver en bedre pasform på en bredere række af patient ansigts former.



Indadbøjet næseforsegling

Forbedring af pasformen eliminerer behovet for en separat næse klemme. Designet til at reducere risikoen for, at ilt kommer ind i patientens øjne

Materialet, der danner formen på masken er gennemsigtigt, og tillader visualisering af patientens næse og læber. Materialet er også stabilt nok til at holde maskens form under transport og brug

Pædiatrisk medium koncentrations maske

Intersurgical EcoLite pædiatrisk medium koncentration iltmaske er ekstremt let og behagelig.



Tilgængelig med iltslange med universal konnektorer, som kan monteres til en 6 mm flowmeter studs, eller monteres direkte på en 9/16 UNF Diameter index Safety System (D.I.S.S.) flowmeter.



Kode	Beskrivelse	Slange længde	Antal pr. karton
1190015	Intersurgical EcoLite, medium koncentrations iltmaske, pædiatrisk		42 
1196015	Intersurgical EcoLite, medium koncentrations iltmaske, pædiatrisk med iltslange	2,1m	40 
1196019	Intersurgical EcoLite, medium koncentrations iltmaske, pædiatrisk med iltslange med universal konnektorer	2,1m	40 

[Send en forespørgsel](#)

[Se videoen](#)

Pædiatrisk justerbar venturi maskesæt

Intersurgical EcoLite™ pædiatrisk justerbar venturi maskesæt, fås med Silente™ og MultiOx™ justerbar venturi ventil.

Send en forespørgsel



Kode	Beskrivelse	Slange længde	Antal pr. karton
1138015	Silente, Intersurgical EcoLite, justerbar venturi maskesæt, pædiatrisk med iltslange	1,8m	40
1118005	MultiOx, Intersurgical EcoLite, justerbar venturi maskesæt, pædiatrisk med iltslange	1,8m	40

Pædiatrisk forstøver ansigtsmaske og forstøver

Intersurgical EcoLite pædiatrisk forstøvmaske fås løs, eller med Cirrus™2 eller HOT Top™2 forstøver.

Send en forespørgsel



Kode	Beskrivelse	Slange længde	Antal pr. karton
1198015	Intersurgical EcoLite forstøvmaske, pædiatrisk, løs		42
1454015	Intersurgical EcoLite pædiatri forstøvmaske med Cirrus2 forstøver og iltslange	2,1m	36
1468015	Intersurgical EcoLite pædiatri forstøvmaske med HOT Top2 forstøver og iltslange	1,8m	36

Referencer:

1. E.M.Gotlib, Composition of incineration products of plasticed PVC. Materials Reactive & Functional Polymers 48 (2001) 209-213.
2. M. Wey, The Influence of Heavy Metals on the Formation of Organics and HCl During Incinerating of PVCcontaining Waste, Journal of Hazardous Materials 60_1998, 259-270.
3. D.Wang, Polychlorinated Naphthalenes and Other Chlorinated Tricyclic Aromatic Hydrocarbons Emitted from Combustion of Polyvinyl Chloride, Journal of Hazardous Materials, 2006.

Produkt med lavere miljøpåvirkning

IS 10.19 DK ▪ Issue 14 12.24



Intersurgical Danmark, Rådhusstorvet 7, 1, 3520 Farum, Danmark
T: +45 28 69 80 00 info@intersurgical.dk www.intersurgical.dk



Fabrikanten Intersurgical Ltd er certificeret til
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 og MDSAP

Venligst overvej før du printer

Spar energi og papir.
Hvis du ønsker at printe dette produktblad,
venligst print på dobbeltside.